

Biodream ENERGY

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
DIFFUSORE BIO MAGNETIC

TORINO

Sede e Magazzino

Via Barletta, 109/10 - 10136 Torino

Negozi

Via Barletta 136/C - 10136 Torino

MILANO

Via IV novembre, 92

20021 Bollate MI

BERGAMO

Via Artigiani, 2

24060 Brusaporto BG

www.energy-biodream.com

info@energy-biodream.com

+39 011 32 41 317



SOMMARIO

| | |
|---|---|
| Chi siamo..... | 1 |
| Considerazioni generali..... | 2 |
| Descrizione del Prodotto..... | 2 |
| Manutenzione e pulizia..... | 3 |
| Misure precauzionali di sicurezza | 3 |
| Controindicazioni | 3 |
| Indicazioni di utilizzo | 4 |
| Garanzia | 5 |



n. CS1346989



GARANZIA

Stimato Cliente,

la ringraziamo nuovamente per la preferenza accordataci. Voglia cortesemente leggere le condizioni di Garanzia, per un miglior servizio di post vendita.

Garantiamo che il dispositivo da Lei acquistato è stato prodotto interamente in Italia, che i materiali impiegati sono tutti di altissima qualità, totalmente certificati, non nocivi per la salute dell'uomo e nel pieno rispetto delle più severe norme sull'ambiente.

Piccole imperfezioni sono irrilevanti per l'utilizzo e la durata del prodotto, esse sono da attribuirsi alla diversa tipologia di materiali utilizzati ed ai vari processi di lavorazione.

Garantiamo che la composizione e le caratteristiche del prodotto sono quelle indicate nelle etichette.

La garanzia ha effetto dalla data di acquisto ed ha validità illimitata per il suo funzionamento.

Ci impegniamo, a nostro insindacabile giudizio, a provvedere alla riparazione o sostituzione del prodotto, che durante il periodo di garanzia risulti viziato da originari difetti di materiale e/o lavorazione.

Per la sostituzione del prodotto saranno considerate valide ed attendibili le segnalazioni pervenute in sede, con comunicazione scritta, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della merce.

Non sono coperte da garanzia le parti soggette ad usura o danni causati da trascuratezza, negligenza e manomissioni.

L'Azienda declina ogni responsabilità per i danni cagionati a persone, animali o cose dovuti all'incuria, alla negligenza di coloro che utilizzano il prodotto in modo improprio o fanno cattivo uso dei materiali in esso contenuti.


Non rientrano nella garanzia ingiallimenti, aloni, la normale usura dei tessuti e la perdita di spessore della lastra.

Non sono inclusi diritti più ampi, indennizzi o spese aggiuntive.

INDICAZIONI D'USO

Per un uso corretto del diffusore Magnetico è necessario posizionarsi sul lato con l'etichetta, l'immagine deve essere con la testa rivolta verso i cuscini.

Non deve essere capovolto né girato.

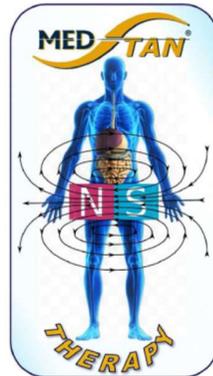

PATOLOGIE TRATTABILI



Artrite – Artrosi - Cefalea - Dolore anca - Cervicalgia
Cicatrizzazioni – Contusioni – Distorsioni - Dolore Ciclo
Mestruale - Dolore ginocchio - Dolore gomito - Dolore
spalla Edemi - Ematomi - Fibromialgia - Fratture - Ritardo
consolidamento osseo - Lombosciatalgia - Nevralgia
Osteoporosi - Problemi circolatori - Psoriasi - Rilassamento
muscolare - Sciatalgia - Strappi muscolari - Tendinite
Antirughe – Cellulite.

Si consiglia un ciclo di trattamento della durata di 60 giorni,
con una pausa di 7 giorni ogni 30. Da ripetere in autunno
ed in primavera.

Nei casi di patologie particolarmente gravi si può utilizzare
anche continuativamente per tutto l'anno.

CHI SIAMO


Il mondo di Energy Bio Dream

La Energy, presente da oltre trent'anni sul territorio nazionale, è un'azienda di vendita diretta e indiretta all'avanguardia progettata ed organizzata con un particolare sistema distributivo, in espansione in tutta Italia, che anticipa e propone grandi opportunità.

La ENERGY, da anni, ha focalizzato tutta la sua esperienza, la sua professionalità e, soprattutto, i suoi principali investimenti nella ricerca in tecnologie altamente avanzate, al fine di centrare ben precisi obiettivi quali: SALUTE e BENESSERE e MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA

A Torino sono presenti la sede amministrativa, il magazzino ed un'area dedicata all'esposizione. Nel marzo 2009 è stato aperto l'ufficio commerciale in provincia di Milano, e nel 2018 è stata inaugurata a Brusaporto BG la nuova sede commerciale dedicata esclusivamente al progetto ENERGY-Biodream.

La nostra attività consiste nella ricerca continua di prodotti ad alto contenuto tecnologico realizzati coniugando Natura e Scienza, mirati a migliorare la nostra e la vostra Qualità della Vita!

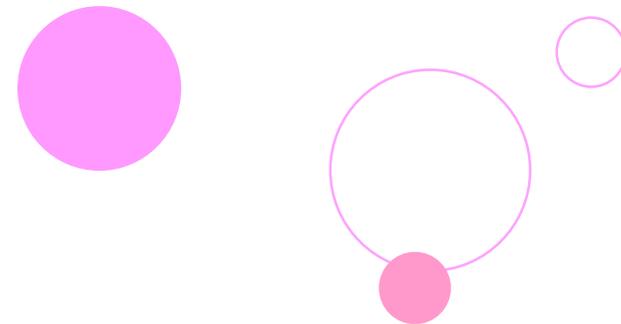

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Magnetoterapia è una pratica medica in uso ormai da centinaia di anni. Tuttavia è ancora poco conosciuta ed applicata, anche se i suoi effetti curativi sono ormai scientificamente dimostrati. Questa cura ha due grandi vantaggi: non ha effetti collaterali negativi e costa poco.

La magnetoterapia è una forma di medicina che sfrutta i campi magnetici pulsanti generati da deboli correnti elettriche. Essa è in uso nella pratica clinica già da molti anni (rientra, infatti, nel capitolo delle cosiddette terapie fisiche, come la radarterapia, la marconiterapia e gli ultrasuoni), ma il suo impiego sistematico ha conosciuto un rinnovato impulso soltanto negli anni Ottanta, grazie a una ripresa degli studi sulle sue possibilità di cura.

Occorre dire, per non gettare benzina sul fuoco di un esagerato ottimismo, che non è una terapia universalmente valida, ossia, adatta ed efficace per tutte le malattie, ma può essere sfruttata con profitto soltanto per alcuni disturbi, mentre in altri casi integra e arricchisce le normali risorse terapeutiche (farmaci, bisturi, ecc.) a disposizione del medico.

DESCRIZIONE PRODOTTO

I Diffusori Magnetici Medstan® sono dispositivi terapeutici rivestiti da un tessuto tecnologico denominato CARBON ACTIVE THERAPY testato e certificato per la capacità di irradiazione magnetica dei campi naturali. All'interno sono predisposti una lastrina in Poligomma a base di Biosoya con Nano molecole di Carbonio e Argento ed i magneti permanenti brevettati per quest'articolo. Tutti i Diffusori Magnetici Medstan® sono stati studiati per migliorare lo stato di salute dell'uomo. I Diffusori Magnetici Medstan® sono stati progettati per controllare, modulare e garantire l'attività elettromagnetica che avviene all'interno del corpo umano. Quando le informazioni elaborate dalle cellule sono troppo basse può insorgere una patologia, le cellule possono essere aiutate a migliorare la loro funzionalità da onde artificiali: MAGNETO TERAPIA A CAMPO STABILE, studiata e distribuita con armonia per garantire Energia, Vitalità e Salute.

Nella disposizione delle fibre conduttive è stato studiato, riprodotto e attuato un lavoro di tessitura tale da creare una proporzione matematica, particolarmente frequente in natura, denominata SEZIONE AUREA. Quando le energie viventi sia elettromagnetiche che biologiche si trovano più vicine a questo rapporto il sistema biologico ne trae grandissimi benefici. I diffusori Magnetici Medstan® sono stati progettati con particolari filamenti in rame denominati CIRCUITI OSCILLANTI necessari per ottimizzare l'oscillazione cellulare al fine di riattivare l'energia radiante oscillatoria rimodulando la frequenza della cellula malata.

MANUTENZIONE E PULIZIA

È severamente vietato lavare il prodotto in acqua, a mano o in lavatrice, a secco o presso le lavanderie.

Per pulire il tessuto si consiglia l'utilizzo di un panno umido ben strizzato, o di detersivi in polvere senza risciacquo a base di componenti naturali.

Si consiglia di porre il prodotto spesso all'aria.

In caso di necessità il tessuto deve essere protetto con un telo cerato.

CONTROINDICAZIONI

Innocua e non invasiva, la magnetoterapia è una cura alla portata di tutti, dai bambini agli ultranovantenni.

Non è adatta alle persone portatrici di pace-maker.

In gravidanza, non perché vi siano prove di nocività ma per maggior cautela si segue la regola "nel dubbio, è sempre meglio astenersi".

MISURE PRECAUZIONALI

DECADENZA DELLA GARANZIA

È severamente vietato aprire il tessuto che riveste la lastra interna. All'interno della lastra sono inseriti Magneti Potentissimi l'uso inappropriato può causare danni a persone e cose. L'Azienda produttrice declina ogni responsabilità.